

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**

BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Kvalitet och Kunskap Sedan 1991



Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJ – KATALOG OKTOBER – JANUARI

## 2015 – 2016



**Littmann® och  
WelchAllyn®  
stetoskop**  
Nu till kampanjpris!

**Premiär!**  
Nya otoskop och  
oftalmoskop  
från WelchAllyn®

**WelchAllyn®**  
Blodtrycksmätare och  
FlexPort®-manschetter  
Nu till kampanjpris!

**Trippelmanschett™ – TriCUFF® – Originalet**  
Fler än 90 000 st levererade

Sannolikt världens mest dokumenterade blodtrycksmanschett



Welch Allyn  
767-serien  
har livstids  
kalibrerings-  
garanti på  
manometern!

Art.nr: 5703

**WelchAllyn® Kampanjpris!**

Ord. pris ~~2.224,-/st~~ Nu **1.695,-/st** ▶  
TriCUFF® med unika handmanometern DS65 med tryckventil.

◀ Ord. pris ~~3.095,-/st~~ Nu **2.595,-/st**

TriCUFF® med nya väggmanometern WA 767.

En manschett för  
både smal, normal  
och bred arm med  
unika DuraShock  
teknologin.  
Extra stöttålig  
manometer som  
även tål fall utan  
att förlora sin  
kalibrering!

Art.nr: 5012



Rekommenderas!



**Nyhet!** ABI-System Dopplex® Ability

Automatic Ankle Brachial Index System är en  
revolutionerande ankel/arm-indexmätare.  
ABI beräknas enkelt och korrekt  
på 3 minuter utan behov av  
att låta patienten vila först.

Art.nr: H-DA100PB

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**HUNTLEIGH Kampanjpris!**

Ord. pris ~~3.285,-~~ Nu **2.955,-/st** ▶

◀ Ord. pris ~~40.595,-~~ Nu **36.535,-/st**

Dopplex® D900

Exkl probe. Vi rekommenderar  
att båda problemen H-EZ8 och  
H-VP5-HS köps till handdopplern!

Art.nr: H-D900



## OMRON har världens mest dokumenterade blodtrycksmätare

Blodtrycksmätare som  
klarar alla patienter med  
spritbara manschetter  
i alla storlekar!  
Manschett för  
normal arm och  
nätdapter ingår.



**Kampanjpris! OMRON HBP-1300**

Ord. pris ~~6.345,-/st~~ Nu **4.995,-/st** ▶

**Kampanjpris! OMRON HBP-1100**

◀ Ord. pris ~~4.395,-/st~~ Nu **3.495,-/st**

Art.nr: 4211

Stöttålig blodtrycksmätare  
som klarar alla patienter  
med spritbara manschetter  
i alla storlekar. Uppladd-  
ningsbara batterier, adap-  
ter/laddare och manschet-  
ter för normal och  
bred arm ingår.

Art.nr: 4213



**Vanligt tillbehör:**

Golvstativ till  
OMRON 907 och  
OMRON HBP-1300  
Ord. pris ~~4.275,-~~  
Nu! **2.695,-**  
Art.nr: 1234



**Kampanjpris! OMRON 907**

Den ultimata blodtrycksmätaren som även klarar  
alla problempatienter. Uppladdningsbara batterier, adapter/  
laddare och standardmanschett ingår.

Ord. pris ~~8.955,-/st~~ Nu **7.395,-/st**

Art.nr: 1220

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



Rekommenderas!



**Kampanjpris! OMRON SpotArm i-Q142**

Blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum är här! Mätaren kan kopplas till  
dator och skrivare. Den är mycket smidig att använda på både normal och bred arm med  
en och samma manschett (22 cm-42 cm). Nätdapter ingår.

Art.nr: 1251 Denna modell finns även som OMRON SpotArm i-Q132 med manschett för 17 cm-32 cm.

Ord. pris ~~2.995,-/st~~ Nu **2.595,-/st**

Art.nr: 1250



För  
blodtrycksrummet!



**Kampanjpris! OMRON i-C10**

Manschett och batterier ingår.

Ord. pris ~~1.729,-/st~~ Nu **1.495,-/st**

Unikt formad manschett för både normal och bred arm!

Lämpar sig även väl för utlåning till patient med sitt inbyggda skyddslock och den förlängda slangen (1,2 m)m.m.

OBS! Art.nr. 1240 OMRON M7 finns kvar till kampanjpriset 1.595,-/st! Art.nr: 1252

Efterföljaren  
till bästsäljaren  
Omron M7



Forstärkt kardborre  
på manschetten

**FRAKTRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 4270** **OMRON M6 AC BLACK EDITION.** Omron M6 i nytt utförande. Manschetten passar normal och bred arm (17 cm-42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier, nätadapter och förvaringsväska. M6 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitetsindikator på resultaten – om personen rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med symboler). M6 styrs med en knapp för lättare handhavande.

**Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och guide (två LED ljus) för hur man sätter på manschetten korrekt.**

Ord. pris 1.755:- **Kampanjpris 1.395:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ❖

**Art.nr: 1240** **OMRON M7.** Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett, för både normal och bred arm. M7 mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en specialmanschett som innehåller två storlekar i en (22 cm-42 cm), 1,2 m slang och är formad för att undvika manschetthypertoni. M7 visar även ett genomsnittligt värde av de tre senaste märesultaten. Manschett och batterier ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.949:- **Kampanjpris 1.595:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ♥

**Art.nr: 1252** **OMRON i-C10. Efterföljaren till Omron M7!** Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för både normal och bred arm. i-C10 mäter på både upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en specialmanschett som innehåller två storlekar i en (22 cm-42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. **Manschetten har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** i-C10 kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. i-C10 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. i-C10 är enkel att använda med enknappsfunktion. Den inbyggda manschettförvaringen förenklar transport och användning. Locket skyddar mot damm och smuts. Manschett och batterier ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.729:- **Kampanjpris 1.495:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ♥

**Art.nr: 1243** **OMRON M10-IT.** Lika tillförlitlig som nya i-C10 men med fler funktioner och möjlighet att koppla till dator. M10-IT har även den en unikt formad specialmanschett för att undvika manschetthypertoni. **Nu med längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** Den är enkel att applicera och passar både normal och bred arm (22 cm-42 cm). M10-IT kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. M10-IT upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. M10-IT är enkel att använda med enknappsfunktion. Manschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.995:- **Kampanjpris 1.695:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ◆

**Art.nr: 1241** **OMRON 705CP-II.** Blodtrycksmätare med skrivare (ersättaren till 705CP – ASCOT mätaren). Resultaten kan skrivas ut ett åt gången, i samlade resultat och i tabellformat. Utskriften visar även genomsnittligt värde på märesultaten. Som tillbehör till 705CP-II finns även PC-anslutning med mjukvara och USB-kabel (se tillbehör), som passar alla windows 98, 2:nd edition eller nyare. Standardmanschett och batterier ingår. 28 minnen i tid och datum.

Ord. pris 3.295:- **Kampanjpris 2.695:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ●

**Art.nr: 1220** **OMRON 907.** Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscillometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett.

Ord. pris 8.955:- **Kampanjpris 7.395:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ■

**Art.nr: 4270P** **OMRON M6 PROFESSIONAL BLACK EDITION.** Ett paket där den populära mätaren Omron M6 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17 cm-42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschetten för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M6 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitetsindikator på resultaten – om personen rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med symboler). M6 styrs med en knapp för lättare handhavande.

**Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och guide (två LED ljus) för hur man sätter på manschetten korrekt.**

Ord. pris 2.295:- **Kampanjpris 1.895:-**

**Se tillbehör och reservdelar** ❖

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett**

3 års garanti på **alla** mätare (6 månader på manschetter, 1 år på TriCUFF® och barnmanschetter).  
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

**OMRON**

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
**Rekommenderas!**



Ny uppdaterad  
modell med ännu  
bättre manschett  
och 1,2 m slang!

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



**FRAKTRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 1253 OMRON MIT Elite Plus.** Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design och ljusupplyst display för mätning även vid mörkare förhållanden. MIT Elite Plus mäter enbart på uppvägen för minskat tryck i manschett och ger en snabbare och behagligare mätning. MIT Elite Plus visar även ett genomsnittligt värde av de tre senaste mätresultaten. MIT Elite Plus upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Kan kopplas till dator. Standardmanschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.950:- **Kampanjpris 1.695:-**

**Se tillbehör och reservdelar ♠**

**Art.nr: 1254 OMRON MIT Elite.** Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design. MIT Elite har samma funktioner som mätare MIT Elite Plus (mätaren ovan), förutom att den inte går att koppla till datorn och inte har en upplyst display. MIT Elite och Elite Plus visar även om mätresultatet ligger för högt i enlighet med riktlinjer från WHO. Mätarna är enkla att använda och bära med sig. Standardmanschett och batterier ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.695:- **Kampanjpris 1.495:-**

**Se tillbehör och reservdelar ♣**

**Art.nr: 1250 OMRON SpotArm i-Q142.** Blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum är här! Mätaren kan kopplas till dator och skrivare. Den är mycket smidig att använda på både normal och bred arm med en och samma manschett (22 cm-42 cm). I-Q142 mäter både på upp- och nedvägen för säkrare och snabbare och därmed behagligare mätning. I-Q142 har ett unikt automatiskt fastsättningssystem för manschett. Genom att placera armen genom manschett på det medföljande armstödet säkerställs korrekt placering av manschett varje gång patienten mäter. I-Q142 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Minnesfunktion för 2 x 84 minnen i tid och datum. Levereras med manschett och nätadapter.

Ord. pris 2.995:- **Kampanjpris 2.595:-**

**Se tillbehör och reservdelar ★**

**Art.nr: 1251 OMRON SpotArm i-Q132.** Samma blodtrycksmätare som ovan men för smal och normal arm i en och samma manschett (17 cm-32 cm). Denna modell går ej att koppla till dator och skrivare. Levereras med manschett, batterier och nätadapter.

Ord. pris 2.295:- **Kampanjpris 1.995:-**

**Se tillbehör och reservdelar ▶**

## Tillbehör och reservdelar:

- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:2101 Måttband för överarm, handled och midja. Pris 95:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:1200 Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 315:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:1254-1 Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. Pris 419:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:1254-2 Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. Pris 255:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:1203 Manschett Stor (32-42 cm). Pris 369:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:1202 Manschett Medium (22-32 cm). Pris 235:-
- ♣♣♦♦★♦♦♥♦♦ Art.nr:1201 Manschett Liten (17-22 cm). Pris 369:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1243-1 Manschett till 773, M7, M10-IT & i-C10 (22-42 cm). Pris 439:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1270-1 Manschett till alla M6 (22-42 cm). Pris 419:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:4270-1 Manschett till M6 Prof.B.E. & M6AC B.E. (22-42 cm). Pris 619:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1223 Manschett till R5-I och R7 (13,5-21,5 cm). Pris 285:-
- ♣♣♦♦ Art.nr:1204 Nippel. Pris 15:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1204-1 Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 15:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1204-4 Nippel till M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 15:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1240-4 Batterilucka till Omron M7, i-C10 och 705 CP II. Pris 19:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1260-4 Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. Pris 19:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1270-4 Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. Pris 19:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:4270-4 Batterilucka till Omron M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 19:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1258 Nätadapter S. Pris 319:-
- ★♦♦♣♣ Art.nr:1257 Nätadapter till MIT och i-Q. Pris 319:-
- ★♦♦ Art.nr:1232 Skrivare till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 1.195:-
- ★♦♦ Art.nr:1232-1 Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. Pris 109:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1241-1 CD-rom till 705 CP II och R7. Pris 89:-
- ♣♦♦♦ Art.nr:1250-1 CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 89:-
- ★♦♦ Art.nr:1241-2 USB-kabel till 705 CP II, R7 och i-Q142. Pris 698:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1243-2 USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 698:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1270-2 Förlängningsslang 1,2 m till M6W, M6AC och M6 Prof. Pris 95:-
- ♦♦♥♦♦ Art.nr:1240-2 Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 95:-  
(ingår vid köp av en ny Omron M7, M10-IT och i-C10)

**OBS!** Vid köp av art.nr: 1201, 1306-01, 1306-11, 1305-01 och 1305-11 måste art.nr: 1240-2 köpas till. (Gäller för M7, M10-IT och i-C10)

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett**

3 års garanti på **alla** mätare (6 månader på manschetter, 1 år på TriCUFF® och barnmanschetter).  
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

**OMRON**



## Vanliga tillbehör:



**Art.nr: 1258**

**Art.nr: 1234**

**Art.nr: 1232**

**Hygienskydd för blodtrycksmanschett**



**Art.nr: H-ACC-VAS-016**



**Art.nr: 1200**

FRAKTFRITT  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL**<sup>®</sup>  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN<sup>™</sup>



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 4213** **OMRON HBP-1300.** Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar och stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är shock-proof vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. Splash-proof betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Rekommenderas!

Ord. pris 6.345:- **Kampanjpris 4.995:-**

**Se tillbehör och reservdelar ✕**

**Art.nr: 4211** **OMRON HBP-1100.** Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är splash-proof vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter.

Ord. pris 4.395:- **Kampanjpris 3.495:-**

**Se tillbehör och reservdelar ✕**

Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1300 och HBP-1100:

✕ ✕ Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450:-

✕ ✕ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 315:-

✕ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- Nu **2.695:-**

✕ ✕ Art.nr: 4217 Manschett XL (42-50 cm). Pris 1.095:-

✕ ✕ Art.nr: 4218 Manschett L (32-42 cm). Pris 865:-

✕ ✕ Art.nr: 4219 Manschett M (22-32 cm). Pris 525:-

✕ ✕ Art.nr: 4220 Manschett S (17-22 cm). Pris 495:-

✕ ✕ Art.nr: 4221 Manschett XS (12-18 cm). Pris 455:-

✕ ✕ Art.nr: 1001-40 Trippelmanschett<sup>™</sup> TriCUFF<sup>®</sup> med nippel (15-42 cm). Ord. pris 1.315:- Nu **1.050:-**

✕ Art.nr: 4222 Batteripack. Pris 825:-

✕ Art.nr: 4223 Nätadapter. Pris 319:-

✕ Art.nr: 1258 Nätadapter S. Pris 319:-

✕ ✕ Art.nr: 4224 Förlängningsslang 1,5 m. Pris 265:-

✕ ✕ Art.nr: 4225 Förlängningsslang 3,5 m. Pris 309:-

✕ ✕ Art.nr: 4226 Nippel. Pris 69:-

✕ ✕ Art.nr: 4227 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 158:-

**Art.nr: 4208** **OMRON RS8.** Enkel och fulladdad blodtrycksmätare för handleden med ny design som har "allt". Den minsta, lättaste (80 g) och tystaste handledsmätare Omron någonsin har gjort. Med den senaste Intellisense teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. Den integrerade manschetten för handledsomkrets mellan 13,5 cm och 21,5 cm sätts på undersidan av armen för bekvämare och enklare handhavande. RS8 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning av resultatet, minnesfunktion som lagrar 2 x 100 resultat i tid och datum samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitets indikator på resultatet – om personen har rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med bilder). Resultaten visas i sifferform, grafisk form och via en blodtrycksnivå indikator. RS8 styrs av en knapp för lättare handhavande samt en 3D-styrd lägespositionering som styr så att mätaren alltid är i rätt höjdhöjd (går att stänga av). Mätaren går att koppla till datorn trådlöst via NFC (Near Field Communications) och kan användas med Bi-Link mjukvaran. Batterier ingår.

Ord. pris 1.995:- **Kampanjpris 1.695:-**

**Se tillbehör och reservdelar ✦**

Tillbehör och reservdelar till Omron RS8:

✦ Art.nr: 4208-1 CD-rom. Pris 89:-

✦ Art.nr: 4208-2 USB-kabel (NFC). Pris 698:-

✦ Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). Pris 285:-

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**OMRON**

**OMRON HBP-1300**  
tål stötar och fukt!



**Golvstativ**  
med korg  
Art.nr: 1234

Hygienskydd för  
blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200

Art.nr:  
H-ACC-VAS-016



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



## Sänkt blodtryck utan biverkningar med **RESP@RATE**™!

**RESP@RATE**™ – Ett nytt sätt att sänka blodtrycket – helt utan biverkningar!

**Effektivt** – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt med **RESP@RATE**™.

Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

**Säkert** – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats vid behandling med **RESP@RATE**™.

**Enkelt** – **RESP@RATE**™ är enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.

**Art.nr: 1001-100 Specialpris 2.396:-** Ord. pris 2.639:-

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



**Nu i nytt utförande!**

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett

3 års garanti på Omrons mätare (6 månader på manschetter).

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

## Meditech ABPM-05 24-timmars blodtryck

– Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare –

### Meditech ABPM-04 och Nya ABPM-05

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtryck sedan 1990 och ABPM-05 är den femte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notifield Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritannien).

### Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska principen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

### BHS-validerad

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

### Koppling till PC-baserad journal

Programvaran *CardioVisions* till Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen *Profdoc* och *Medidoc* (går även att koppla till övriga).

### Teknisk data: ABPM-05

Mätmetod: oscillometrisk  
Mätområde: 0-280 mmHg  
Minneskapacitet: 600 registreringar  
Trycksensor: piezo-resistiv  
Noggrannhet:  $\pm 3$  mmHg, eller  $\pm 2\%$  av reg.värde  
Dataöverföring: optisk fiber  
PC interface: seriellt eller USB  
Vikt: 236 gram inkl. batt.  
Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
Bruksanvisning på svenska medföljer.  
2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.

### Teknisk data: ABPM-04

Mätmetod: oscillometrisk  
Mätområde: 0-280 mmHg  
Minneskapacitet: 600 registreringar  
Trycksensor: piezo-resistiv  
Noggrannhet:  $\pm 3$  mmHg, eller  $\pm 2\%$  av reg.värde  
Dataöverföring: optisk fiber  
PC interface: seriellt eller USB  
Vikt: 350 gram inkl. batt.  
Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm  
Bruksanvisning på svenska medföljer.  
2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.

**Art.nr: 3101-05** Meditech ABPM-05 komplett. Ord. pris 25.900:- **Kampanjpris 21.900:-** (monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version). Finns även med Bluetooth (ABPM-05 Blue).

**Art.nr: 3101** Meditech ABPM-04 komplett. Ord. pris 22.900:- **Kampanjpris 18.900:-** (monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version).

**Art.nr: 3110** Nätverkslicens (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

### Tillbehör och reservdelar:

**Art.nr: 3102-05** Meditech ABPM-05 (monitor, manschett och väska). **Pris 19.900:-**  
**Art.nr: 3102** Meditech ABPM-04 (monitor, manschett och väska). **Pris 17.900:-**  
**Art.nr: 3103-L** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-stor extra lång (40-58 cm). **Pris 1.295:-**  
**Art.nr: 3103** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-stor (32-42 cm). **Pris 1.150:-**  
**Art.nr: 3104** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-barn (<24 cm). **Pris 1.150:-**  
**Art.nr: 3105** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-normal (24-32 cm). **Pris 995:-**  
**Art.nr: 3105-L** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-normal extra lång (32-40 cm). **Pris 1.150:-**  
**Art.nr: 3106** Bärväska till Meditech ABPM-04. **Pris 1.045:-**  
**Art.nr: 3106-05** Bärväska till Meditech ABPM-05. **Pris 1.045:-**  
**Art.nr: 3109** Serielt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 5.700:-**  
**Art.nr: 3111** Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 5.700:-**

### Labtech Cardiospy EC-12R Vilo EKG

EC-12R är en liten och lätt (endast 140 g) EKG monitor. Den kan användas som 3/6/12 funktion kopplad till en PC. Överföringen av data sker trådlöst med Bluetooth. Programvaran *Cardiospy* till EC-12R har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen *Profdoc* och *Medidoc* (går även att koppla till övriga). Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 3560** Labtech EC-12R komplett. Ord. pris 29.900:- **Kampanjpris 24.900:-**

Paketet innehåller en 12 kanalers EKG apparat med Bluetooth kommunikation.  
Programvara för registrering och analys. USB-02/A interface (Bluetooth). 2 års garanti.

**Omron HeartScan HCG-801** känner av vågform (sinuskurva) i hjärtat och visar möjliga EKG-avvikelser.

- Kan under 30 sekunder mäta hjärttrytmen och vågformen (sinuskurva) varje gång den används
- Efter varje mätning utför mjukvaran automatiskt en utvärdering av alla insamlade data
- Direkt efter genomförd mätning visas rytmnlinjen på LCD-skärmen
- För en mer detaljerad utvärdering kan data överföras till en PC med EKG-mjukvara
- SD-minnet kan lagra upp till 300 mätningar, vilket möjliggör långtidsmätning
- Mätaren är mycket enkel att använda

**Art.nr: 4061** Ord. pris 9.725:- **Kampanjpris 8.265:-** Vikt 106 g. Mått: 12 x 6,5 x 2 cm. CE-märkt. Kliniskt validerad. 3 års garanti.

Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



Nya ABPM-05



Nya  
ABPM-05  
Blue



ABPM-04



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Paketerbudande!**  
**Omron HeartScan HCG-801**  
med monitor och mjukvara

FRAKTFRI  
vid order över  
3.000,-

# AJ MEDICAL®

BLODRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE!

Trippelmanschett™ - TriCUFF® - Original

Fler än 90 000 st levererade. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Bild

- 1 Art.nr: 5011** TriCUFF® trippelmanschett™. Väljer automatiskt rätt storlek!  
En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS55 (extra stöttålig) med skruvventil. Ord. pris 2.074:- **Kampanjpris 1.595:-**
- 2 Art.nr: 5012** En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil. Ord. pris 2.224:- **Kampanjpris 1.695:-**
- 3 Art.nr: 5015** En komplett trippelmanschett™ med elektronisk handmanometer. Ord. pris 2.240:- **Kampanjpris 1.795:-**
- 4 Art.nr: 5703** En komplett trippelmanschett™ med **nya** väggmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.095:- **Kampanjpris 2.595:-**
- 5 Art.nr: 5173** En komplett trippelmanschett™ med **nya** bordsmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.095:- **Kampanjpris 2.595:-**
- 6 Art.nr: 5110** Ett komplett paket för att ta manuellt blodtryck. En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil, stetoskop Welch Allyn Duophon 40 mm och hjärtnivåkudden HELP. Ord. pris 2.888:- **Kampanjpris 2.195:-**
- 7 Art.nr: 5175** En komplett trippelmanschett™ på golvstativ med hjul med **nya** WA 76 och stor korg. Ord. pris 4.455:- **Kampanjpris 3.595:-**

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Rekommenderas!

### Blodtrycksmätare manuell AJM® med Welch Allyn DuraShock. Tål fall från höjd utan att förlora kalibreringen!

2-slang komplett med stötsäker manometer vid manschetterna och bollpump med skruvventil.

Manschetterna har tydliga markeringar för kontroll så att rätt storlek används. Hela blodtrycksmätaren är latexfri. 5 års garanti på mekaniken. Läs mer om **unika** DuraShock teknologin på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se). Denna modell finns även med koniska manschetter.

**Art.nr: AJM-8005-00** 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 895:-

**Art.nr: AJM-8002-00** 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 895:-

**Art.nr: AJM-8001-00** 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 815:-

**Art.nr: AJM-8003-00** 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 965:-

**Art.nr: AJM-8020-00** 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.195:-

**Art.nr: AJM-8004-00** 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.245:-

**Art.nr: AJM-8021-00** 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.245:-

**Kamp. pris 695:-**

**Kamp. pris 695:-**

**Kamp. pris 695:-**

**Kamp. pris 795:-**

**Kamp. pris 895:-**

**Kamp. pris 995:-**

**Kamp. pris 995:-**

Vid behov av alla 3 storlekarna välj:

TriCUFF® För armar med en omkrets mellan 15 och 42 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!

1-slang helt latexfri med handmanometer och skruvventil DS55. 10 års garanti på mekaniken.

Denna modell finns även med koniska manschetter.

**Art.nr: AJM-1306-00** 3x20 cm för Nyfödda barn. Ord. pris 1.225:-

**Art.nr: AJM-1305-00** 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 1.195:-

**Art.nr: AJM-1304-00** 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 1.195:-

**Art.nr: AJM-1301-00** 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 1.115:-

**Art.nr: AJM-1302-00** 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 1.265:-

**Art.nr: AJM-1319-00** 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.495:-

**Art.nr: AJM-1303-00** 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.545:-

**Art.nr: AJM-1320-00** 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.545:-

**Kamp. pris 795:-**

**Kamp. pris 795:-**

**Kamp. pris 795:-**

**Kamp. pris 795:-**

**Kamp. pris 895:-**

**Kamp. pris 995:-**

**Kamp. pris 1.095:-**

**Kamp. pris 1.095:-**

Vid behov av alla 3 storlekarna välj:

TriCUFF® För armar med en omkrets mellan 15 och 42 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!

Ovanstående 1-slags manschetter finns även med handmanometer WA DS65 och tryckventil.

Ange art.nr: -1612 istället för -00. Pristillägg 100:-. Reservdelar till 2- och 1-slags manschetter finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

**Art.nr: AJM-1301-1615** En komplett AJM®-manschett för normal vuxen arm 22-32 cm med elektronisk handmanometer. Ord. pris: 1.235:- **Kampanjpris 995:-**

#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/fp. Pris 450:-

Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/fp. Pris 315:-

Art.nr: 1001 Trippelmanschett™ TriCUFF® komplett utan manometer. Ord. pris 1.245:- Nu **995:-**

Art.nr: 1001-00 Latexfri TriCUFF®. Ord. pris 1.550:- Nu **1.245:-**

Art.nr: 1002 Innerblåsa till TriCUFF®. Ord. pris 945:- Nu **795:-**

Art.nr: 1002-00 Latexfri innerblåsa till TriCUFF®. Ord. pris 1.175:- Nu **945:-**

Art.nr: 1003 Hölje/manschett till TriCUFF®. Pris 315:-

Art.nr: 1004 Spänne/lås till TriCUFF®. Pris 95:-

Art.nr: 1610 Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord. pris 829:- Nu **665:-**

Art.nr: 1611 Handmanometer WA DS54 med skruvventil. Pris 499:-

Art.nr: 1909 Bollpump till WA DS55 och DS54. Pris 39:-

Art.nr: 1612 Handmanometer WA DS65 med tryckventil. Ord. pris 979:- Nu **785:-**

Art.nr: 1909-1 Bollpump till WA DS65. Pris 335:-

Art.nr: 1613 Handmanometer WA DS58 med skruvventil. Ord. pris 1.595:- Nu **1.295:-**

Art.nr: 1602 Handmanometer WA Disytest med tryckventil. Pris 499:-

Art.nr: 8006-12 Dosmanometer för DS minus. Pris 525:-

Art.nr: 1615 Elektronisk handmanometer. LD-20. Ord. pris 995:- Nu **795:-**

Art.nr: 1801 Hjärtnivåkudden HELP. Pris 435:-

Art.nr: 1899 Stoppur- Fasttime 2, digital. Pris 495:-

#### Tillbehör och reservdelar till WA 767-serien:

Art.nr: 1905-4 T-koppling + 1 meter slang (för att koppla TriCUFF® till WA767). Pris 69:-

Art.nr: 5272 Stor korg för golvstativ och väggmont. Pris 379:-

Art.nr: 5278 Vägghållare/fäste för montering på skena. Pris 599:-

Art.nr: 1906 Spiralslang. Pris 239:-

Art.nr: 1907 Boll med tryckventil. Pris 169:-

Art.nr: 1908 Boll med skruvventil. Pris 169:-

Art.nr: 5204-5 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 76:-

**Tillbehör och reservdelar till manschetter (hölje+blåsa):**

Art.nr: AJM-8031 2-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309:-

Art.nr: AJM-8032 2-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239:-

Art.nr: AJM-8034 2-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389:-

Art.nr: AJM-1316 1-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309:-

Art.nr: AJM-1313 1-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239:-

Art.nr: AJM-1314 1-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389:-

Övriga storlekarna finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll av blodtrycksmätarna!**

**För beställning använd bifogad beställningsblankett**

3-10 års garanti på manometrar och livstids kalibreringsgaranti på 767-serien, 1 år på manschetter, tillbehör och reservdelar. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

**TriCUFF®**  
För armmkrets  
15-42 cm!

**1.**  
**2.**  
**3.**  
**4.**  
**5.**  
**6.**  
**7.**

**Art.nr:  
AJM-8001-00**

**Art.nr:  
H-ACC-VAS-016**

**WelchAllyn®**  
**AJ MEDICAL®**

**Art.nr:  
AJM-1301-00**

**Art.nr:  
AJM-1301-1612**

**Art.nr:  
AJM-1301-1615**

**Så fungerar DuraShock teknologin**

Läs mer på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

Olika stetoskop i rostfritt stål från 3M™ Littmann® med högsta kvalitet. Varumärket Littmann står för oöverträffad kvalitet. Varumärket är världsberömt för den akustiska återgivningen, den innovativa designen och den höga kvaliteten. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Bild

- 1 Art.nr: 1865 **Littmann 3200 Elektroniskt med Bluetooth.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå och vinröd. Ord. pris 4.995,- **Kampanjpris 4.495,-** CD-skiva med mjukvara medföljer.
- 2 Art.nr: 1855 **Littmann 3100 Elektroniskt.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd och marinblå. Ord. pris 4.195,- **Kampanjpris 3.775,-**
- 3 Art.nr: 1808 **Littmann Cardiology S.T.C.** Längd: 69 cm. 6 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd, marinblå och plommon. Ord. pris 2.520,- **Kampanjpris 2.265,-**
- 4 Art.nr: 1804 **Littmann Master Cardiology Special Editions.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: mässing, rökgrå och Black Edition. Ord. pris 3.130,- **Kampanjpris 2.795,-**
- 4 Art.nr: 1803 **Littmann Master Cardiology.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd, marinblå, plommon, mörkgrön, olivgrön och karibienblå. Ord. pris 2.720,- **Kampanjpris 2.445,-**
- 5 Art.nr: 1848 **Littmann Cardiology III/Dual Special Editions.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: koppar, mässing, rökgrå, Rainbow och Black Edition. Ord. pris 2.375,- **Kampanjpris 2.135,-**
- 5 Art.nr: 1811 **Littmann Cardiology III/Dual.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd, marinblå, plommon, karibienblå, röd, mörkgrön, chokladbrun, grå och starkt rosa. Ord. pris 2.325,- **Kampanjpris 2.095,- NYA FÄRGER!**
- 6 Art.nr: 1735 **Nyhet! Littmann Classic III.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå, hallonröd, vinröd, lavendel, turkos, citrus, smaragdgrön, tuggummirosa, plommon, orange, karibienblå, grå, mörkgrön, rosa, himmelsblå och limegrön. Ord. pris 1.065,- **Introduktionspris 955,- NYA FÄRGER!**
- 7 Art.nr: 1827 **Littmann Master Classic II.** Längd: 69 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, karibienblå, vinröd, marinblå, barrgrön, himmelsblå, lila och mörkgrön. Ord. pris 1.125,- **Kampanjpris 995,-** (Denna modell finns även som veterinärstetoskop för stora djur)
- 8 Art.nr: 1849 **Littmann Classic II S.E. Special Editions.** Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: koppar, mässing, rökgrå, Rainbow och Black Edition. Ord. pris 1.020,- **Kampanjpris 915,-**
- 8 Art.nr: 1815 **Littmann Classic II S.E. Originalstetoskopet.** Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, grå, marinblå, karibienblå, mörkgrön, vinröd, orange, himmelsblå, ljusgrön, havsblå, persika, rosa, barrgrön, hallonröd, tuggummirosa, citrus, smaragdgrön och lila. Ord. pris 965,- **Kampanjpris 865,-**
- 9 Art.nr: 1750 **Littmann Classic II Rainbow Edition.** Pediatrik/Barn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Slangfärg: karibienblå. Ord. pris 1.195,- **Kampanjpris 1.075,-**
- 9 Art.nr: 1821 **Littmann Classic II.** Pediatrik/Barn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, karibienblå, röd, hallonröd, marinblå, tuggummirosa, orange, kungsblå, persika och barrgrön. Ord. pris 1.125,- **Kampanjpris 995,-** (Denna modell finns även som veterinärstetoskop för små djur)
- 10 Art.nr: 1751 **Littmann Classic II Rainbow Edition.** Infant/Spädbarn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Slangfärg: hallonröd. Ord. pris 1.195,- **Kampanjpris 1.075,-**
- 10 Art.nr: 1824 **Littmann Classic II.** Infant/Spädbarn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, röd, hallonröd, tuggummirosa, persika, kungsblå, orange och karibienblå. Ord. pris 1.125,- **Kampanjpris 995,-**
- 11 Art.nr: 1831 **Littmann Select - sjuksköterskestetoskop.** Längd: 71 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: karibienblå, vinröd, kungsblå, havsblå, tuggummirosa och persika. Ord. pris 615,- **Kampanjpris 555,- NYA FÄRGER!**
- 12 Art.nr: 1768 **Littmann Lightweight II S.E.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, himmelsblå, tuggummirosa, karibienblå, ljusgrön, ljuslila och vinröd. Ord. pris 385,- **Kampanjpris 345,- NYA FÄRGER!**
- 13 Art.nr: 1835 **Namnbricka till Littmann stetoskop. Pris 115,-** **Gravering!** Nu kan vi även erbjuda gravering av namnbrickan mot ett tillägg av 95,-. Max 13 tecken. **NYA FÄRGER!**
- 14 Art.nr: 1703 **Welch Allyn Planoscap** för vuxen 40 mm, svart. Ord. pris 249,- **Kampanjpris 219,-** Finns även i färgerna: gult, rött, blått och grönt.
- 15 Art.nr: 1709 **Welch Allyn Duophon** för vuxen 40 mm, svart. Ord. pris 329,- **Kampanjpris 269,-** Finns även i färgerna: gult, rött, blått och grönt.
- 16 Art.nr: 1714 **Welch Allyn Professional** för vuxen 72 cm, svart. Ord. pris 1.039,- **Kampanjpris 899,-** Finns även i färgerna: grått, mörkblått och vinrött.
- 17 Art.nr: 1729 **Welch Allyn Professional** för barn 72 cm, svart. Ord. pris 1.039,- **Kampanjpris 899,-**
- 18 Art.nr: 1718 **Welch Allyn Harvey Elite** för vuxen 71 cm, svart. Ord. pris 2.399,- **Kampanjpris 2.099,-** Finns även i färgerna: skogsgrönt, mörkblått och vinrött. **Inklusive namnbricka!**
- 19 Art.nr: 1730 **Welch Allyn Harvey Elite** för barn 71 cm, svart. Ord. pris 2.399,- **Kampanjpris 2.099,-**
- 20 Art.nr: 1731 **Welch Allyn Uniscope Enpatientstetoskop** för vuxen, gult. **Pris 79,-**
- 21 Art.nr: 1732 **Welch Allyn Uniscope Enpatientstetoskop** för barn, blått. **Pris 69,-**

Fler modeller av stetoskop, tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

**För beställning använd bifogad beställningsblankett**

2-7 års garanti på Littmann stetoskop. 5 år på Welch Allyn Professional, 10 år på Welch Allyn Harvey Elite och 1 år på övriga stetoskop. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.


AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

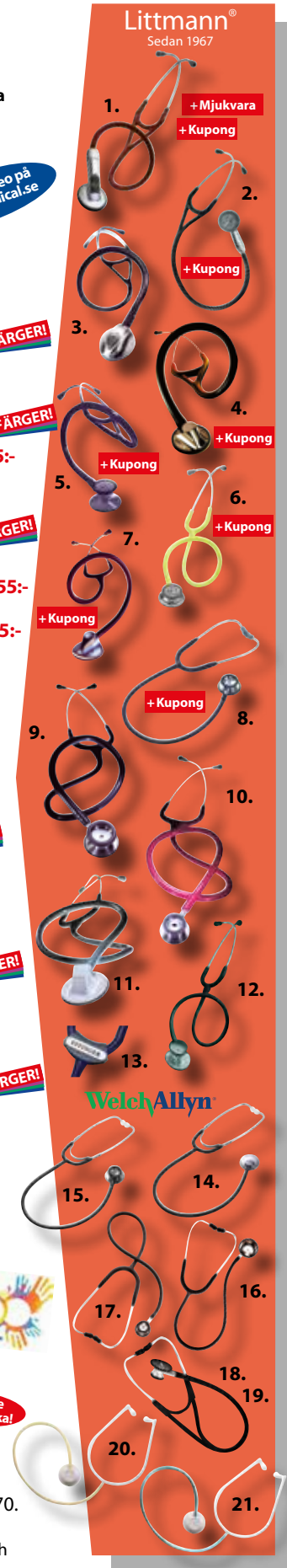

LITTMANN  
SLANGFÄRGER

- Persika
- Havsblå
- Kungsblå
- Tuggummirosa
- Rosa
- Ljuslila
- Röd
- Orange
- Ljusgrön
- Karibienblå
- Hallon
- Lila
- Himmelsblå
- Tallbarrgrön
- Grå
- Plommon
- Mörkgrön
- Marinblå
- Vinröd
- Svart
- Chokladbrun
- Sand
- Olivgrön
- Lavendel
- Turkos
- Citrus
- Smaragdgrön
- Champagne

Efterträdaren

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN<sup>SM</sup>

Vid order över 5.000,- medföljer  
**OMRON Eco Temp Smart** utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE! MEDIAID Saturationsmätare/Pulsoximeter



### MEDIAID M34

Pulsoximeter med larm, minne och möjlighet att kopplas till dator och printer. USB och infraröd port.

- Stapelkurva för pulsstyrka och perfusion
- Laddningsbart batteri med laddare
- Stor display som visar syremättnad och puls
- Larmar både visuellt och via ljudsignal
- 136 h minne. Kan mäta över natten och sparar då data var 5:e sekund
- Liten, smidig och enkel
- Batteriindikator
- 202 g

Art.nr: 6034 Ord. pris 7.995,-

**Kampanjpris 6.795,-**

OBS! En valfri sensor ingår i priset.

Fler modeller, sensorer, tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

### MEDIAID M30 **Rekommenderas!**

Pulsoximeter med grafiska kurvor. Stor display som indikerar syremättnad och pulsfrekvens.

- Stapelkurva för pulsstyrka och perfusion
- Laddningsbart batteri med laddare
- Liten, smidig och enkel
- Batteriindikator
- 200 g

Art.nr: 6030 Ord. pris 5.995,- **Kampanjpris 4.995,-**  
OBS! En valfri sensor ingår i priset.


#### Tillbehör och reservdelar:

Universal Clip Sensor vuxen med 240 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6202  
Universal Clip Sensor vuxen med 75 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6201  
Universal Clip Sensor pediatrik 2-10 år med 240 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6201-2  
Universal Clip Sensor pediatrik 2-10 år med 75 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6203  
Mjuk Sensor Large med 240 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6204  
Mjuk Sensor pediatrik 2-10 år med 240 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6205  
Sensor för örsnibben med 240 cm kabel. **Pris 2.095,-**  
Art.nr: 6030-3  
Gummihölje/skyddshölje till M30 och M34, blå. **Pris 495,-**  
Art.nr: 6030-4  
Gummihölje/skyddshölje till M30 och M34, gul. **Pris 495,-**

### MEDIAID M100

Vår minsta pulsoximeter som är kompakt och smidig att använda för stickprov och kortare kontroller. Stor display som alternerar mellan syremättnad och pulsfrekvens. Vikt 98 g.

Art.nr: 6100 Ord. pris 3.995,-  
**Kampanjpris 3.395,-**

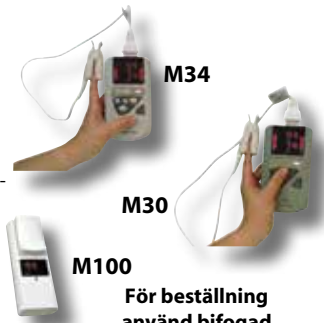

M34

M30

M100

För beställning använd bifogad beställningsblankett

**2 års garanti på M34, M30 och M100. 1 år på övrigt.**

## Premiär!

Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

## WelchAllyn<sup>®</sup> otoskop och oftalmoskop

Art.nr: 2880-510 Pocket Plus LED Set med otoskop och oftalmoskop med hård väska. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 2.995,- **Introduktionspris 2.495,-**



Art.nr: 2880-10 Pocket Plus LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.325,- **Introduktionspris 1.095,-**



Art.nr: 2880-50 Pocket Plus LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.795,- **Introduktionspris 1.525,-**



Art.nr: 2387-2 Väggttransformator 3,5V komplett med MacroView otoskop och oftalmoskop. **Pris 10.995,-**



Art.nr: 2386-2 Bordsladdare komplett med MacroView otoskop och oftalmoskop. **Pris 12.995,-**



Art.nr: 2387 Väggttransformator 3,5V komplett med standard otoskop och oftalmoskop. **Pris 9.769,-**

Art.nr: 2386 Bordsladdare komplett med standard otoskop och oftalmoskop. **Pris 11.749,-**



Art.nr: 2381 MacroView otoskop komplett med laddare. **Pris 5.349,-**



Art.nr: 2383 Standard otoskop komplett med laddare. **Pris 4.689,-**



#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 2392 Oftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.169,-  
Art.nr: 2393 Coaxialoftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.695,-  
Art.nr: 2396 Komplet laddare för ett instrument inkl. bordsställ och laddningsbart litiumjonhandtag 3,5V. Pris 2.859,-  
Art.nr: 2379 Bollpump för trumhinnetest (Standard). Pris 149,-

Art.nr: 2380 Bollpump för trumhinnetest (MacroView). Pris 119,-  
Art.nr: 2389 Förvaringsbehållare för örnrattar. Pris 429,-  
Art.nr: 2390 Örnrattar för engångsbruk, vuxen. 850 st/tp. Pris 615,-  
Art.nr: 2391 Örnrattar för engångsbruk, barn. 850 st/tp. Pris 615,-

Fler modeller, tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

## Kroppssammansättningsmätare med våg

Se demovideo på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Omron BF511.** En 4-punktsmätare (händer och fötter) som mäter fett i kroppen enligt BIA (bioelectrical impedance analysis). Resultaten visas i procentuellt kroppsfett, BMI, skelettmuskelprocent, visceralt fett (djupliggande fett), vilometabolism samt ger en diagnos på resultaten. Mäter även vikten och kan användas som enbart våg om så önskas för upp till 150 kg. Finns i färgerna mörkblå och mintgrön. Klassificerad som medicinsk apparatur (MDD). 3 års garanti. CE-märkt. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) Ord. pris 1.795,- **Kampanjpris 1.495,-**

Art.nr: 4052  
Mörkblå



Art.nr: 4053  
Mintgrön



## seca personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården

**Nya seca 704**  
Art.nr: 7013  
Elektronisk pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion mm. En extra mamma-barnfunktion där barnet vägs i mammans famn. Kapacitet: 300 kg  
Gradering: 50 g upp till 150 kg, 100 g 150-300 kg **Pris 11.400,-**

**Nya seca 376**  
Art.nr: 7021  
Elektronisk barnvåg med extra stor vågskål med högre kanter för ökad säkerhet. Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 7,5 kg, 10 g 7,5-20 kg **Pris 10.150,-**

**Nya seca 959**  
Art.nr: 7012  
Modern och mobil elektronisk stolvåg. TARA, HOLD och BMI-funktion. Kapacitet: 300 kg  
Gradering: 20 g upp till 50 kg, 50 g 50-150 kg, 100 g 150-300 kg **Pris 22.100,-**

**Nya seca 635**  
Art.nr: 7015  
Elektronisk specialvåg med lös display. Kapacitet: 300 kg  
Gradering: 100 g upp till 200 kg, 200 g 200-300 kg  
**Specialpris 19.595,-**  
Ord.pris 23.700,-

**seca 336**  
Art.nr: 7007  
Elektronisk barnvåg. Rekommenderas vid hembesök. Kapacitet: 15 kg  
Gradering: 10 g  
**Pris 9.950,-**

**Nya seca 878**  
Art.nr: 7038  
Elektronisk golvvåg med dubbel display. HOLD och MOR/BARN-funktion. Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg, 200 g 150-200 kg **Pris 9.600,-**

**seca 416**  
Art.nr: 7029  
Mätbräda för spädbarn och små barn. Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade formen gör att barnet ligger rakare och säkrare än i gamla trämodeller. Mätområde: 33 - 100 cm. Gradering: 1 mm **Pris 4.425,-**

**seca 216**  
Art.nr: 2160 **Extra robust!**  
Längdmätare med löpande huvudstöd. Mätområde: 0 - 230 cm  
Gradering: 1 mm  
**Pris 1.119,-**

#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. **Pris 862,-**  
Art.nr: 68-21-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. **Pris 928,-**  
Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem till seca 878. **Pris 1.229,-**  
Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem till seca 336. **Pris 1.289,-**

Art.nr: 7466 Skrivare seca 466 wireless för termopapper eller etiketter. **Pris 4.675,-**  
Art.nr: 7465 Skrivare seca 465 wireless för termopapper. **Pris 3.995,-**  
Art.nr: 7486 Etiketter till seca 466 skrivare, 1 st rulle. **Pris 186,-**  
Art.nr: 7485 Termopapper till seca 465 och 466 skrivare, 5 st rullar. **Pris 145,-**  
Art.nr: 7456 USB adapter seca 466 wireless för överföring av data till PC. **Pris 795,-**

Läs mer och se fler modeller av vågar och längdmätare på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**OBS!** Utnyttja rabattkoden AJ15 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000,- + Omron Eco Tempo Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016. Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!



## KAMPANJERBJUDANDE!

**Welch Allyn®**

**Art.nr: 1971 Nya** VägghälsmanometerN WA 767 med FlexiPort® manschett 11 komplett. Ord.pris 2.355,- **Kampanjpris 1.895,-**

**Art.nr: 1972 Nya** BordsmanometerN WA 767 med FlexiPort® manschett 11 komplett. Ord.pris 2.355,- **Kampanjpris 1.895,-**

Denna modell finns även som golvstativ- och rälsmanometer. Paket med TriCUFF® trippelmanschett™ eller AJM™ standardmanschett finns till alla ovanstående modeller. Se [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

**Art.nr: 1906-20** Tvättlock till FlexiPort®-manschett. **Pris 75,-**

Welch Allyns FlexiPort®-manschetter har lång livslängd och är prisvärda. De är förstahandsvalet för sjukhus och kliniker runt om i världen. FlexiPort®-manschetter finns även som enpatientsmanschetter. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Blodtrycksmätare WA DS44 komplett med FlexiPort®-manschett.**

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Kamp.pris:
DS44-09	Barn	15-21 cm	795,-	<b>695,-</b>
DS44-10	Liten vuxen	20-26 cm	795,-	<b>695,-</b>
DS44-11	Vuxen	25-34 cm	795,-	<b>695,-</b>
DS44-12	Stor vuxen	32-43 cm	895,-	<b>795,-</b>

**Tillbehör och reservdelar endast manschett**

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Nu:
REUSE-06	Litet spädbarn	7-10 cm	<del>329,-</del>	159,-
REUSE-07	Spädbarn	9-13 cm	<del>369,-</del>	189,-
REUSE-08	Litet barn	12-16 cm	<del>439,-</del>	219,-
REUSE-09	Barn	15-21 cm	<del>459,-</del>	229,-
REUSE-10	Liten vuxen	20-26 cm	<del>479,-</del>	249,-
REUSE-11	Vuxen	25-34 cm	<del>499,-</del>	259,-
REUSE-11L	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	<del>539,-</del>	279,-
REUSE-12	Stor vuxen	32-43 cm	<del>669,-</del>	339,-
REUSE-12L	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	<del>709,-</del>	349,-
REUSE-13	Lär	40-55 cm	<del>829,-</del>	409,-

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



**Tillbehör och reservdelar endast manschett med 1-slang och koppling**

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Nu:
REUSE-06-1TPE	Litet spädbarn	7-10 cm	<del>359,-</del>	219,-
REUSE-07-1TPE	Spädbarn	9-13 cm	<del>389,-</del>	249,-
REUSE-08-1TPE	Litet barn	12-16 cm	<del>479,-</del>	279,-
REUSE-09-1TPE	Barn	15-21 cm	<del>519,-</del>	289,-
REUSE-10-1TPE	Liten vuxen	20-26 cm	<del>529,-</del>	309,-
REUSE-11-1TPE	Vuxen	25-34 cm	<del>559,-</del>	319,-
REUSE-11L-1TPE	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	<del>589,-</del>	339,-
REUSE-12-1TPE	Stor vuxen	32-43 cm	<del>749,-</del>	399,-
REUSE-12L-1TPE	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	<del>779,-</del>	439,-
REUSE-13-1TPE	Lär	40-55 cm	<del>909,-</del>	469,-

**Köp till någon av dessa handmanometrar**

Paket med nedanstående handmanometrar och FlexiPort®-manschett storlek 11 för vuxen finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) till kampanjpris!

**Art.nr: 1615**  
Elektronisk handmanometer med uppladdningsbart lithiumbatteri och laddare/nätadapter med 160 cm kabel.  
Ord.pris: 995,- **Nu 795,-**



**Art.nr: 1613**  
Handmanometer WA DS58 med skruvventil.  
Ord.pris 1.595,-  
**Nu 1.295,-**  
Livstids kalibreringsgaranti.



**Art.nr: 1612**  
Handmanometer WA DS65 med tryckventil.  
Ord.pris 979,-  
**Nu 785,-**  
10 års garanti.



**Art.nr: 1610**  
Handmanometer WA DS55 med skruvventil.  
Ord.pris 829,-  
**Nu 665,-**  
10 års garanti.



**Art.nr: 1611**  
Handmanometer WA DS54 med skruvventil utan sked.  
**Pris 499,-**  
5 års garanti.



Tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

Garanti: Manometern WA 767 har livstids garanti. DS44 dosmanometer 5 år, FlexiPort®-manschetter 3 år och övrigt 1 år.

Welch Allyn® FlexiPort® EcoCuff™ enpatientmanschett utan slang och koppling. Blodtrycksmanschett som minimerar risken för smitta. EcoCuff™ klarar 100 användningar. Den är helt fri från BPA, DEHP och PVC. Tillverkad av polypropen som vid förbränning enbart resulterar i koldioxid och vatten. EcoCuff™ har FlexiPort®-teknik från Welch Allyn®. Detta gör det möjligt att ansluta den till så gott som varje typ av blodtrycksmätare. **Levereras med 50 st/fp.**



**Tillbehör och reservdelar för FlexiPort®-manschetter:**

Art.nr:		Pris:
MLT-TUBE	Sats med flera kontakter och slangar	795,-
DS44	Dosmanometer med FlexiPort® adapter	495,-
1908-FP	Pumpboll grå med skruvventil	159,-
1900-FP	Slang grå 60 cm	37,-
1906-P1	Koppling för FlexiPort® 1-slang	21,-
1906-P2	Koppling för FlexiPort® 2-slang	21,-
1906-10	Snabbkoppling för slangförlängning	39,-

**Det finns även vägghållare till EcoCuff™ att köpa som tillbehör, se [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)**

**Welch Allyn® Connex® ProBP™ 3400 blodtrycksmätare utnyttjar avancerad teknologi för att ge noggranna och bekväma oscillometriska blodtrycksmätningar. Den finns i två olika versioner. Antingen mäter den traditionellt på nedvägen eller med SureBP™ på uppvägen. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)**

**Handhållen**

**Art.nr: 3401**  
Ord.pris: 7.215,-  
**Nu 5.795,-**

**Art.nr: 3402**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 8.885,-  
**Nu 6.995,-**



**Bordsmodell**

**Art.nr: 3432**  
Ord.pris: 7.940,-  
**Nu 6.395,-**

**Art.nr: 3433**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 9.610,-  
**Nu 7.695,-**



**Golvmodell**

**Art.nr: 3409**  
Ord.pris: 9.995,-  
**Nu 7.995,-**

**Art.nr: 3410**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 11.655,-  
**Nu 7.995,-**



**Väggmodell**

**Art.nr: 3405**  
Ord.pris: 8.055,-  
**Nu 6.495,-**

**Art.nr: 3406**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 9.715,-  
**Nu 7.795,-**



WA Connex® ProBP™ 3400 levereras med FlexiPort®-manschetterna 11 och 12, batteri och laddare.

1 års garanti på mätaren och 3 års garanti på manschetterna. **Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**

**OBS!** Utnyttja rabattkoden AJ15 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000,- + OMRON Eco Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.


Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Returadress:

**AJ Medical**  
**Uddvägen 32 A**  
**SE-181 30 Lidingö**

**B**

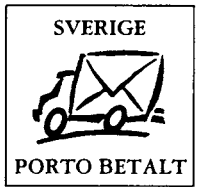

**Missa inte våra unika månadserbjudanden i vår webshop: [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)**

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
**3.000:-**

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer  
**OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!**

Läs mer på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**KAMPANJERBJUDANDE! HUNTLEIGH**

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Nyhett! ABI-System**  
**Dopplex® ABILITY**  
Art.nr: H-DA100PB

DopplexABILITY-Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymväggar på LCD-displayen. Mätresultaten kan antingen skrivas ut på termopapper eller på förklistrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning skyddsstrumpor, nätkabel och bruksanvisning. 1 års garanti. Ord. pris 40.595:- **Kampanjpris 36.535:-**

Programvara finns  
som tillbehör!



**Rekommenderade tillbehör:**

Art.nr: H-ACC-VSM-154 Väggfäste. Pris: 6.495:-  
Art.nr: H-ACC-VAS-013 Golvstativ. Pris: 5.595:-  
Art.nr: H-ACC-VAS-012 Fixeringsplatta. Pris: 315:-  
Art.nr: H-ACC-VAS-011 Manschett-set Stor 34-46 cm. Pris: 4.525:-  
Art.nr: H-ACC-VAS-015 Bärväska. Pris: 1.055:-  
Art.nr: H-DR4 Programvara inkl. USB-adapt. Pris: 5.395:-

**Fosterövervakning**

**Sonicaid® FM 830 Encore**  
Art.nr: H-FM830-Encore

För den mest avancerade fosterövervakningen med icke-invasiva blodtryck och pulsoximeter för modern. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Ord. pris: 110.655:- **Kampanjpris 99.595:-**

Programvara finns  
som tillbehör!



**Sonicaid® FM820 Encore**  
Art.nr: H-FM820-Encore

Fosterövervakningen med tvillingultraljud och separata ECG-kanaler vilket ger flexibel övervakning av både moder och foster. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Ord. pris 90.285:- **Kampanjpris 81.255:-**



**Vaskulär**

**Dopplex® MD200**  
Art.nr: H-MD200-VAS

Dopplex MD200 är en innovativ lösning på läkares krav på en robust, mångsidig och uppladdningsbar dopplerenhet. Kan användas tillsammans med upp till 8 stycken utbytbara prober. 3 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 9.935:- **Kampanjpris 8.945:-**

Programvara finns  
som tillbehör!

Både för vaskulär  
och obstetrisk  
användning!

**Dopplex® MD2**  
Art.nr: H-MD2

Dopplex MD2 bi-directional doppler är en av marknadens mest avancerade handdopplers. Den ger möjlighet till vaskulär bedömning på hög nivå och är idealisk för undersökning av perifer artärsjukdom. 5 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 6.475:- **Kampanjpris 5.835:-**

Programvara finns  
som tillbehör!



**Dopplex® SD2**  
Art.nr: H-SD2

Dopplex SD2 tillhandahåller bi-directional vaskulär information med en display som visar flödesriktningen. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade doppler-studier. 5 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 4.785:- **Kampanjpris 4.295:-**



**Dopplex® D900**  
Art.nr: H-D900

Dopplex D900 är en non-directional ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensärsbehandlingsregimen. 5 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Vi rekommenderar att båda probena H-EZ8 och H-VPS-HS köps till! Ord. pris 3.285:- **Kampanjpris 2.955:-**



**Obstetrik**  
**Sonicaid® FD3**  
Art.nr: H-FD3

Sonicaid FD3 är en vattentålig obstetrisk doppler med display som visar frekvens. Probe med mycket hög prestanda ger tillförlitlig detektion från tidig graviditet och under hela vägen fram till förlösning, även vid överviktiga mammor. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med förlösning i vatten. 5 års garanti. Ord. pris 5.185:- **Kampanjpris 4.665:-**



**Sonicaid® FD1**  
Art.nr: H-FD1

Sonicaid FD1 är en vattentålig obstetrisk doppler med display som visar frekvens. Probe med mycket hög prestanda ger tillförlitlig detektion från tidig graviditet och under hela vägen fram till förlösning, även vid överviktiga mammor. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med förlösning i vatten. 5 års garanti. Ord. pris 5.185:- **Kampanjpris 4.665:-**



**Sonicaid® One**  
Art.nr: H-SonicaidOne

Sonicaid One fosterdoppler med display som visar frekvens som lätt passar i läkares ficka. Dess höga känslighet och vidvinkelteknik möjliggör snabb lokalisering av fostrets hjärta från tidig graviditet till förlösning. 1 års garanti. Ord. pris 4.995:- **Kampanjpris 4.495:-**



**Sonicaid® D930**  
Art.nr: H-D930

Sonicaid 930 Audio Only Doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt för läkare att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlösning. 5 års garanti. Ord. pris 3.995:- **Kampanjpris 3.595:-**



**Sonicaid® D920**  
Art.nr: H-D920

Sonicaid 920 Audio Only Doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt för läkare att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlösning. 5 års garanti. Ord. pris 3.995:- **Kampanjpris 3.595:-**



**Sonicaid® FD2**  
Art.nr: H-FD2

Sonicaid FD2 är toppmodellen av handdoppler med display för frekvens och utbytbara högkänsliga prober. För allmän obstetrisk användning köper man till proben 2 MHz och för detektering av fosterhjärta i en tidig graviditet är proben 3 MHz ett bra tillval. Även 5 andra prober för vaskulär användning finns som tillbehör. En integrerad datautgång ger möjlighet till utskrift av fostrets hjärtfrekvens om den ansluts till Dopplex Printa. 5 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 3.695:- **Kampanjpris 3.325:-**



Både för vaskulär  
och obstetrisk  
användning!

**Kirurgi**

**Intraoperativ probe startpaket Art.nr: H-ISP3**

Högkänslig 8 MHz återanvändbar intraoperativ probe. Levereras med probeadapter, dopplerfäste till droppställning och 3 st prober. **Pris 11.375:-**



**Intraoperativ probe**

Art.nr: H-IPP3

Levereras med 3 st prober. **Pris 8.745:-**



**Tillbehör och reservdelar (Vaskulära doppler, FD2 och MD200):**

Art.nr: H-OP2-HS Högkänslig probe 2 MHz. **Pris 3.025:-**  
Art.nr: H-OP3-HS Högkänslig probe 3 MHz. **Pris 3.025:-**  
Art.nr: H-VP4-HS Högkänslig probe 4 MHz. **Pris 3.025:-**  
Art.nr: H-VP5-HS Högkänslig probe 5 MHz. **Pris 3.025:-**  
Art.nr: H-VP8-HS Högkänslig probe 8 MHz. **Pris 3.025:-**  
Art.nr: H-VP10-HS Högkänslig probe 10 MHz. **Pris 3.025:-**  
Art.nr: H-EZ8 Högkänslig Easy 8 vidvinkel probe 8 MHz. **Pris 3.715:-**

Art.nr: H-ACC3  
Art.nr: H-ACC24  
Art.nr: H-PRINTA2

Art.nr: H-ACC-VAS-019  
Art.nr: H-ACC-VAS-017  
Art.nr: H-ACC-VAS-013  
Art.nr: H-DR4

Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 975:-**  
Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 555:-**  
Dopplex Printa II – Skrivare för användning med Dopplex RD2, Dopplex MD2, Dopplex MD200 och Sonicaid FD2. (Inkluderar Interface Buffer Box, ACC76). **Pris 7.785:-**  
Etiketter till Printa II och ABILITY, 5 st rullar. **Pris 645:-**  
Termopapper till Printa II och ABILITY, 5 st rullar. **Pris 365:-**  
Hygienskydd. 100 st/tp. **Pris 315:-**  
Programvara inkl. USB-adapt. (För användning med MD2, MD200, RD2 och ABILITY). **Pris 5.395:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

För mer information: besök vår webbplats [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) eller ring 08-767 29 70  
**För beställning: Ring 08-767 29 70 Faxe 08-767 29 82 Klicka [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
eller använd bifogad beställningsblankett och skicka in – Vi bjuder på portot!**

**AJ MEDICAL**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen eller slutförsäljning.



Tejpa här

På nätet  
sedan 1998

**AJ MEDICAL**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

**Säljer allt inom blodtryck**

**Blodtrycksmätare: Manuella, elektroniska och 24-timmars.**

**Vi utför även utbildning, service och kalibrering. Övriga tillbehör för blodtrycksmätning finns.**

**Övrigt sortiment:**



**Stetoskop:** Littmann, Welch Allyn och Meditron **Vågar:** Seca och Omron **Längdmätare:** Seca **Febertermometrar:** Omron och 3M **Kroppfettsmätare:** Omron

**Stegräknare/Aktivitetmätare:** Omron **TENS-apparat:** Omron **Eltandborstar:** Omron **Nebulisatorer:** Omron och Maxin **Blodtryckssänkare:** Resperate

**Otoskop:** Welch Allyn och KaWe **Oftalmoskop:** Welch Allyn och KaWe **EKG:** Meditech, Labtech, Welch Allyn och Omron **EKG-elektroder:** 3M **Pulsoximeter:** Mediasid **Reflexhammare:**

KaWe **Stämgaflar:** KaWe **Belysning:** Welch Allyn, AJ Medical och KaWe **Stasband:** KaWe **Spirometri:** Welch Allyn, Labtech och MIR

**Doppler:** Huntleigh **Hudinstrument:** Welch Allyn **Laryngoskop:** Welch Allyn **Rekto-/Proktoskopi:** Welch Allyn **Syntavlor:** AJ Medical **Öron/Näsa/Hals:** Welch Allyn

**Hela vårt sortiment med mer information finns på**

**[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) eller för att beställa direkt**

**[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)**

**Välkomna!**



 På Facebook



Vi utför även service på samtliga produkter.

Tillbehör och reservdelar finns vid behov.

**Beställ för över 10.000:- och få 5% i extra rabatt!**

**(Fraktfritt + OMRON Eco Tempo Smart + 5% i extra rabatt)**

**Ange rabattkoden: AJ15 när ni gör er beställning.**

**(Gäller hela sortimentet, dock ej avtalskunder, upphandlade priser och servicetjänster)**

Vik här

Frankeras ej  
AJ Medical  
betalar  
portot

**AJ Medical**

**Svarspost**

**201 222 31**

**181 20 Lidingö**

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-



Vid order över 5.000,- medföljer  
**OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!**

## Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enl. SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195,-/st** per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275,-/st.

Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

### Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år) 585,-		

**Välj fraktsätt:**  Sjukvård och företag  Privatperson  
 DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)  Postförskott (hämtas på utlämningsställe)  
 Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

**Summa:**

Ange gärna kundnumret ..... (4 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod .....

**Leveransadress:** ..... **Fakturaadress:** (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn: .....

Org.nr/Personnr: .....

Box: .....

Gatuadress: .....

Postnr./Ort: .....

Telefon: ..... Fax: .....

E-post: .....

Kryssa för rutan om ni vill ha unika erbjudanden via e-post en gång i månaden.

Datum/Namn-teckning: .....

Namn-förtydligande: .....

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö  
och återfås servade och klara inom 5 dagar!** (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)

**Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82**

**E-post: info@ajmedical.se**

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2016.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.