



Längdmätarna seca 264, seca 274, *wireless* FRAMTIDENS LÄNGDMÄTARE, REDAN IDAG



seca 264,
för väggmontage.

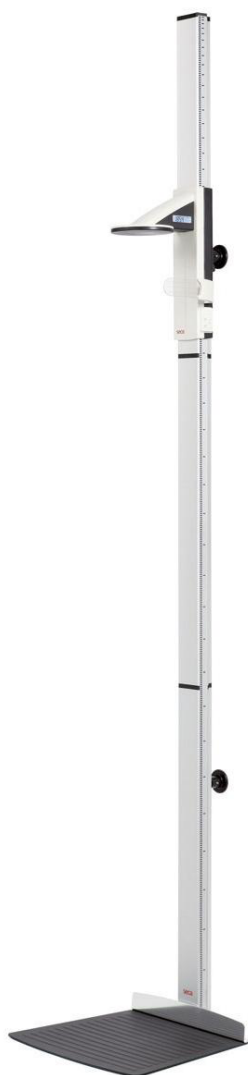

"Frankfurt Line"

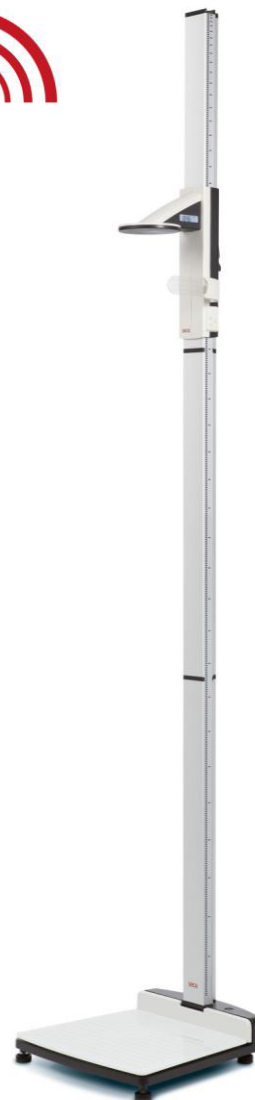

seca 274,
för fristående placering.
Hjul under pelaren gör den lättflyttad.

Vad menas med att längdmätarna är förberedda för framtiden redan idag?

Jo, längdmätarna **seca 264** och **seca 274, wireless** är förberedda för trådlös överföring av längden t.ex. till en seca skrivare. Den kan också sända längden till en seca wireless pelarväg där längden kan användas för automatisk uträkning av BMI. Längden kan sedan skrivas ut tillsammans med vikten och BMI. Det smarta är att du bara aktiverar den/de funktioner som du vill använda!

Längdmätarna är förberedda för framtiden redan idag!

Längdmätarna seca 264, seca 274, wireless

Vilka grundfunktioner finns det?

- Ett **helt nytt hjälpmedel** på längdmätaren, vid sidan av huvudstödet (**Frankfurt Line**), hjälper dig att placera patientens huvud i rätt position.
- Huvudstödet har en bromsknapp som ska tryckas in när huvudstödet flyttas.
- Längdmätaren har HOLD-knapp som låser längden så den inte kan påverkas.
- Längden visas i en upplyst display (15/30sek) på huvudstödet, på millimetern. Då slipper du risken för osäker avläsning.
- Du kan också nollställa längdmätaren på valfri höjd så du t.ex. kan mäta sittande patienter.
- För att spara batteri stänger längdmätaren automatiskt av längdvisningen efter 1 minut.

Vilka extra funktioner får jag?

- Du kan aktivera en trådlös överföring av värdet till en seca skrivare så att du kan få ett kvitto. Eftersom överföringen är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst, ända upp till 10 meter bort!
- Längdmätarna kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och där t.ex. kopplas samman med pelarvägen **seca 704 wireless** för överföring av längden, BMI bestämning och vidare till seca skrivare för kvittoutskrift och även vidare överföring av alla värden till analysprogrammet seca 105, via seca 456, USB adapter (se separat produktblad).

FAKTA:

Mätområde	30 – 220cm
Gradering	1 mm
Mått: seca 264, vägg (BxHxD)	43 x 235 x 47cm
Vikt: seca 264	5kg
Mått: seca 274, fristående (BxHxD)	44 x 240 x 47cm
Vikt: seca 274	15kg

Längdmätarna drivs med helt vanliga AA batterier.
Displayen visar, i god tid, när batterierna behöver bytas.

TILLBEHÖR:



**seca 465/seca 466
skrivare**

CE: seca 264 och seca 274 wireless uppfyller direktivet **93/42/EEG, MDD**.