

smartsigns®
Compact 300 Serien

HUNTLEIGH

**Flexibel, pålitlig
och prisvärd**



...performance for life


Enkel, pålitlig och prisvärd

SC300 är en ny nätansluten/batteridrivnen kompakt monitor för kontroll av vitala funktioner. Denna kraftfulla och flexibla plattform erbjuder sjukvårdspersonal en rad mätningar som inkluderar icke invasivt blodtryck, puls, pulsoximetri och örontemperatur (trådlös).

SC 300 är utrustad med ett batteripack med lång livstid och hög kapacitet som räcker för 12 h vilket gör att mätaren kan användas på olika sorters vårdinrättningar.

Patientstatus visas på den 6" färgkodade digitala skärmen som möjliggör för klinisk personal att fatta kritiska beslut på plats.

SC300 är lämpad för vuxna, pediatrika och neonatala patienter.

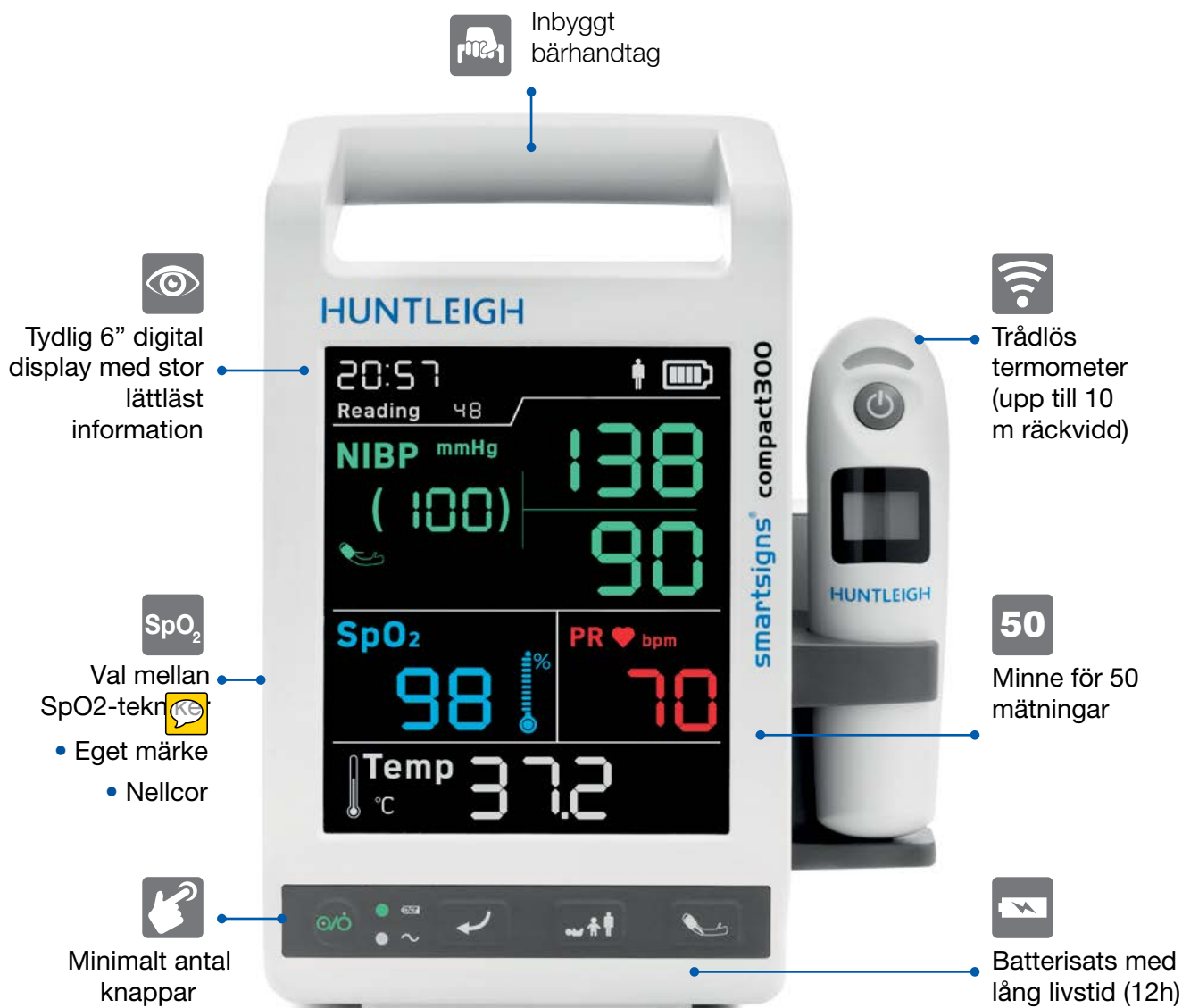



SC300 placeras lätt i alla miljöer, sjukhusavdelningar, mottagningsrum eller kliniker.

Maximera produktiviteten

Den attraktiva designen med dess lättanvända gränssnitt maximerar vårdgivarens produktivitet. Mätningar görs genom ett knapptryck vilket betyder att användare kan lägga mer tid på att ta hand om patienten snarare än att arbeta sig igenom användardokumentation eller inställningsalternativ.

Den trådlösa termometern levererar exakta, sekundsnabba mätningar på alla patientgrupper. Den föruppvärmda sondspetsen förbättrar patientens upplevelse och stöder exakta mätningar.

För att underlätta och effektivisera administrationen kan det stora interna minnet lagra upp till 50 mätningsset.

Produktens mjuka ytor och förseglade tangentbord underlättar rengöring och därmed minskar risken för korsinfektion. Det integrerade bärhandtaget hjälper till vid transport och ger portabilitet.

SC300 har en ökad flexibilitet genom urvalet för montering. Man kan välja mellan ett golvstativ med plats för tillbehör, väggfäste med korg eller krokar och ett stångfäste för begränsade utrymmen.



Väggmonteringsmöjlighet med korg



Väggmonteringsmöjlighet med krokar



Fäste för montering på droppställning

smartsigns®

Compact 300 Serien

“Som vårdgivare handlar dagens vård om att vara effektiv och kompetent, SC300 med sin flexibilitet möter dessa utmaningar...”



Teknisk specifikation

| Smartsigns Compact 300 Serien | |
|------------------------------------|---|
| Storlek | 125 x 299 x 130 mm |
| Vikt | 1,25 kg |
| Displaytyp/storlek | LED, 100 x 120 mm |
| Kraftspänning | 100 – 240 VAC |
| Energifrekvens | 50/60Hz |
| Ingående ström | 0,15 – 0,3 A |
| Batterityp/kapacitet | Lithium Ion, 11,1 V, 2 200 mAh |
| Typ av termometerbatteri/kapacitet | LR03 (AAA x 2), 1,5 VDC |
| Patientgrupper | Vuxen, Pedriatik & Neonatal |
| NiBP | Oscillometrisk |
| SpO ₂ | 0 % till 100 %, 1 % steg |
| Temperatur (tillval) | Membran, 34°C till 42,2°C (93,2°F till 107,6°F) |

| Smartsigns Compact 300 Serien – Beställningskoder | |
|---|---|
| Beställningskod | Beskrivning |
| H-SC300 | NiBP, puls och SpO ₂ |
| H-SC300T | NiBP, puls, SpO ₂ och temperatur |
| H-SC300N | NiBP, puls och SpO ₂ (Nellcor) |
| H-SC300NT | NiBP, puls, SpO ₂ (Nellcor) och temperatur |

Varumärket Nelcor tillhör Covidien AG.

HUNTLEIGH ...performance for life

Huntleigh Healthcare Ltd. - Diagnostic Products Division

35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom

T: +44 (0)29 20485885 F: +44 (0)29 20492520 E: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk

W: www.huntleigh-diagnostics.com



Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2015

AN ARJOHUNTLEIGH COMPANY, MEMBER OF GETINGE GROUP

® och ™ är varumärken som tillhör Huntleigh Technology Limited

Eftersom vår ledande princip är ständig förbättring förbehåller vi oss rätten att förändra konstruktioner utan förvarning.

AW:1001005-1

AJ MEDICAL
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

AJ MEDICAL
Uddvägen 32 A, 181 30 Lidingö
Tel: 08-767 29 70 • Fax: 08-767 29 82
ajmedical.se

LIT 781310/SE-1